


Портативный ирригатор полости рта

Модель: FL-V5/FL-V6

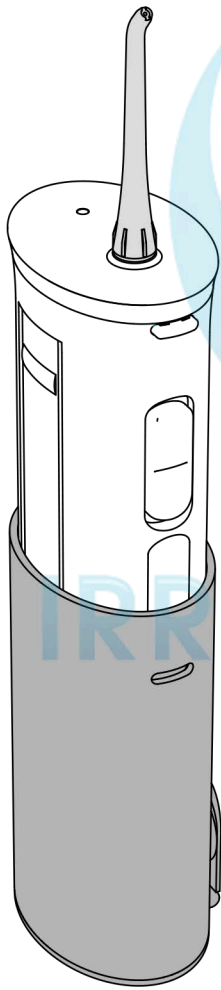

IRRIGATOR.RU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Поздравляем! Выбрав портативный ирригатор полости рта, вы сейчас на пути к улучшению здоровья десен и здоровой улыбке!

Доказано клинически, что комбинация напора воды и пульсаций удаляет вредные бактерии глубоко между зубами ниже уровня десен, где одной чистки не достаточно.

Спасибо, за выбор портативного ирригатора полости рта!

Спасибо, за выбор портативного ирригатора полости рта!

Традиционная чистка




Традиционная чистка не может легко удалить скрытые остатки пищи и вредные бактерии.




Зубная нить имеет ограниченный доступ ниже уровня десен.

Забота о полости рта с ирригатором полости рта

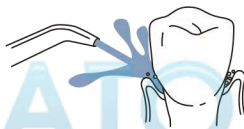

Ирригатор полости рта удаляет труднодоступные остатки пищи и вредные бактерии.



Важные защитные меры.....	4
Описание продукта.....	6
Инструкция по использованию.....	7
Уход и очищение.....	10
Руководство по устранению неполадок....	11
Охрана окружающей среды.....	12
Сервис и гарантия.....	13

IRRIGATOR.RU

ВАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ВАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните её на будущее для справок.

ОПАСНО!

Чтобы снизить риск поражения

Держите розетку и зарядное устройство вдали от воды.

Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками

Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости

Проверьте зарядный шнур на предмет повреждений перед первым использованием и в дальнейшем использовании прибора.

Не используйте прибор во время ваннных процедур.

Не располагайте и не храните прибор вблизи от воды находящейся в ванной, раковине, и т.д

Убедитесь в том, что зарядное устройство полностью сухое, перед тем как включать его в источник питания.

Предупреждение:

Если у вас была сделана операция полости рта или десен меньше чем два месяца назад, то перед применением проконсультируйтесь со стоматологом.

Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим указанному на приборе или на зарядном устройстве.

Не используйте прибор если его шнур или зарядное устройство повреждено; если прибор работает неправильно; если прибор упал или повредился или упал в жидкость.

В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального дистрибьютора.

Держите провода вдали от горячих поверхностей

Не используйте прибор, если насадка потеряна.

С особым вниманием относитесь к инструктажу людей со сниженными физическими и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний касающихся использования прибора.

Не пускайте прямую струю воды под язык, в ушной канал, нос и т.д. Прибор способен нанести вред в этих и других участках тела, потому что струя воды находится под давлением.

Не заполняйте бак водой горячее 40°C.

Контролируйте, чтобы дети не играли с прибором.

Заполняйте резервуар только водой или другой рекомендованной жидкостью для полости рта.


Не прижимайте сильно ирригатор к зубам и деснам. Вы можете повредить их.

Если вы испытываете боль в зубах и деснах, не используйте прибор и обратитесь к стоматологу.

Сохраните эти инструкции

IRRIGATOR.RU

Описание прибора

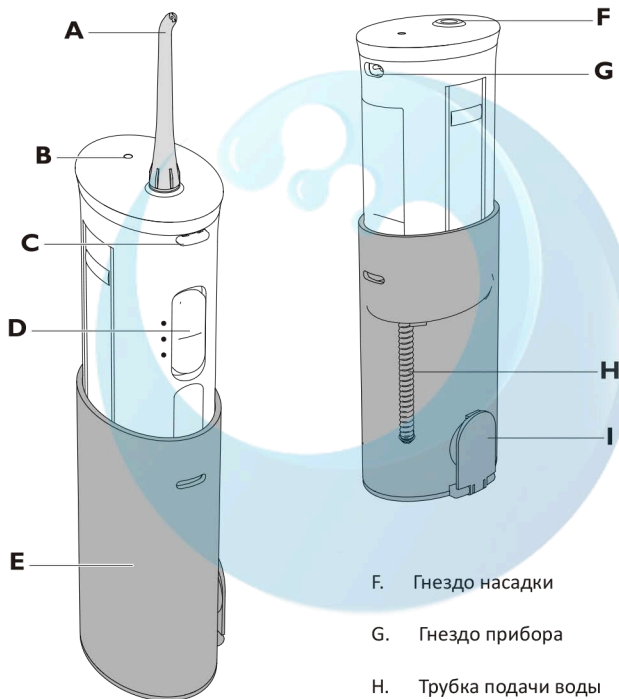

Описание прибора:

- A. Насадка
- B. Индикатор зарядки
- C. Кнопка съема насадки
- D. Переключатель
- E. Резервуар

- F. Гнездо насадки
- G. Гнездо прибора
- H. Трубка подачи воды
- I. Крышка подачи воды

Особенности

Время зарядки - приблизительно 8 часов
 Номинальное напряжение - 100-240 В
 Адаптер для зарядки - напряжение 5 В;
 сила тока 500мА

Аксессуары

2 насадки, провод зарядки usb, адаптер usb для зарядки.


Инструкция по использованию

Зарядка прибора

Заряжайте прибор в течение 24 часов перед первым применением

Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 С

Время работы прибора может быть снижено, если заряжать его при более низких температурах (ниже 15 С). Также прибор может не заряжаться, если окружающая температура ниже 0 С.

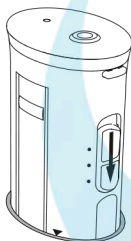

Выключите прибор.

Установите основной блок

Включите прибор в розетку.

Включите прибор, протерев вилку от воды.

Используя прибор 3 раза, подключите зарядное устройство, чтобы активировать батарею

Если вы не используете прибор 3 месяца или более, необходимо заряжать его в течение не менее 16 часов.


Заряжайте прибор только подходящим адаптером.

Если время работы прибора снизилось даже при правильной зарядке, это значит, что батарея изношена (ожидаемая продолжительность работы батареи 3 года, но многое зависит от того, как прибор используется и хранится)



Использование прибора

1. Откройте крышку резервуара для воды
2. Вытащите основной блок прибора вверх как показано стрелкой на картинке
Вытаскивать основной блок прибора с закрытой крышкой резервуара может быть тяжело.
Давление в приборе не будет повышаться пока основной блок прибора не установлен.

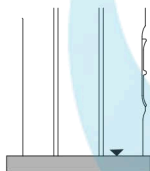

3. Вставьте насадку в её гнездо.
Вставляйте аккуратно до щелчка.
4. Залейте воду в резервуар.




Режимы использования:

1. Сильный
2. Средний (для обычной чистки)
3. Мягкий (когда вас беспокоят десны; когда средний режим для вас слишком сильный)

Советы

Держите прибор вертикально и насадкой вверх.
Держите лицо над раковиной.
Держите рот немного закрытым, чтобы вода не брызгала.
Размещайте насадку в ротовой полости.
Направляйте струю под углом 90° к деснам.
Проводите струей по деснам и приостанавливайтесь между зубами.
Не используйте струю непосредственно в парадонтальных карманах.

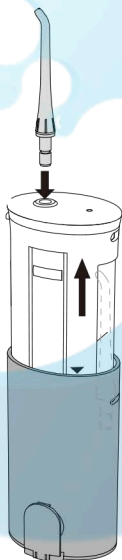



5. Закройте крышку от резервуара.
6. Поместите насадку в ротовую полость.
Всасывающая трубка внутри бака может выйти из воды и поток воды может остановиться когда прибор слишком наклонен.
7. Включите прибор.
Устройство может быть использовано примерно 50 секунд если резервуар полностью заполнен.




После использования

Есть риск распространения бактерий, поэтому тщательно мойте насадку и сушите перед использованием.

1. Откройте крышку резервуара вылейте остатки воды.
2. Включите прибор, чтобы слить остатки воды. Держите прибор включенным 2-3 секунды пока вода не перестанет выходить.

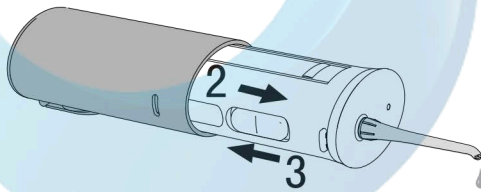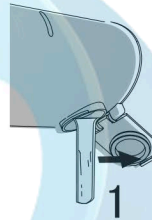

3. Выключите прибор.
4. Нажмите кнопку спуска на насадке. Снимите насадку и уберите её в хранилище.
5. Задвиньте внутрь основную часть прибора.
6. Закройте крышку резервуара.

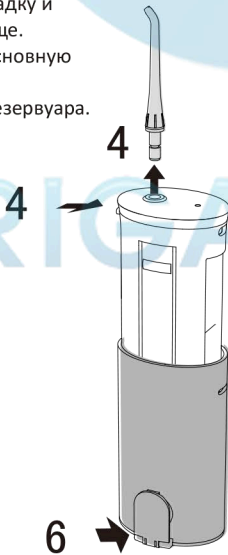

Никогда не погружайте прибор в воду. Протрите прибор снаружи, когда необходимо мягкой тканью и мягким неабразивным моющим средством. Резервуар может быть вымыт мыльной водой или в верхней полке посудомоечной машины.

Перед тем как вымыть отключите от источника питания.

Прежде чем подвергнуть прибор заморозке снимите резервуар и полностью опустошите.

1. Насадка

(Снимите ее, нажав на кнопку съема насадки.)

Промойте насадку водой и протрите тканью.

Пожалуйста, меняйте насадку раз в 6 месяцев.

Если кончик насадки деформировался, пожалуйста, смените насадку.

Не способность сделать это может привести к сбоям в работе.

2. Основная часть прибора

Удаляйте грязь протиранием жидким мылом, протирайте жидкое мыло сухой тканью.

Промывайте водой, если основная часть прибора очень грязная.

Не удаляйте грязь растворителями: бензин, алкоголь и т.д.

Не промывайте водой выше 50°C

Протирайте насухо после промывания водой.

3. Трубка подачи воды

Промывайте водой и вытирайте насухо тканью.

Не сгибайте трубку подачи воды.

Не способность сделать это может привести к сбоям в работе.

4. Резервуар

Резервуар может оторваться, если нажимать слишком сильно в то время как крышка резервуара снята, поэтому

Промывайте водой и вытирайте насухо тканью.

Внутреннюю грязь удаляйте щеточкой или чем-то подобным и вытирайте насухо.

Ёмкость должна быть сухой, если вы не используете прибор долгое время.

5. Крышка резервуара

Удаляйте все загрязнения с крышки.

Не способность сделать это может привести к утечке воды.

6. Зарядное устройство

Протирайте металлическую часть зарядного устройства сухой тканью раз в 6 месяцев.

Сервисное обслуживание

Прибор не имеет потребительско-обслуживаемых электрических элементов и не требует регулярного технического обслуживания. По вопросам сервиса обращайтесь к местному дилеру.

Смотрите серийный и модельный номер на нижней части прибора.


Руководство по устранению неполадок

Проблема	Вероятная причина	Решение
Утечка между насадкой и гнездом для насадки	Насадка не до конца вставлена	Снимите насадку и переустановите
Утечка в резервуаре	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жидкость осталась в резервуаре. 2. Крышка резервуара открыта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всегда полностью удаляйте воду из резервуара 2. Закройте крышку резервуара.
Недостаточное давление/ нет потока жидкости	<ol style="list-style-type: none"> 1. Блок опустошен. 2. Недостаточно жидкости в резервуаре. 3. Соединения с резервуаром забились 4. Включён режим "мягкий". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. насадка должна быть выше резервуара для нормального потока жидкости. 2. Заполните резервуар жидкостью. 3. Заполните бак тёплой водой и одной крышечкой уксуса. Включите прибор и подождите пока вся эта жидкость не выйдет. Промойте резервуар полным баком воды. 4. Переключите прибор на режим "средний".
Прибор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розетка питания не работает. 2. Прибор стоит в режиме "средний"/"мягкий" во время зарядки прибор включён (ON) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключить прибор к работающей розетке. 2. Выключите прибор во время зарядки (OFF)
Прибор не начинает работать после включения	Батарея разряжена	Убедитесь в том розетка работает. Проверьте розетку на другом устройстве. Убедитесь в том, что штифты зарядного устройства чисты и соединение с розеткой беспрепятственное.

Охрана окружающей среды

Снимите встроенные батареи перед тем как утилизировать прибор. Пожалуйста, убедитесь в том чтобы батареи были утилизированы в специальном для этого месте. Ближайший пункт утилизации смотрите в интернете. Не разбирайте батареи, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Выполняйте шаги с 1 по 6 ; поднимите батареи, а затем снимите их.

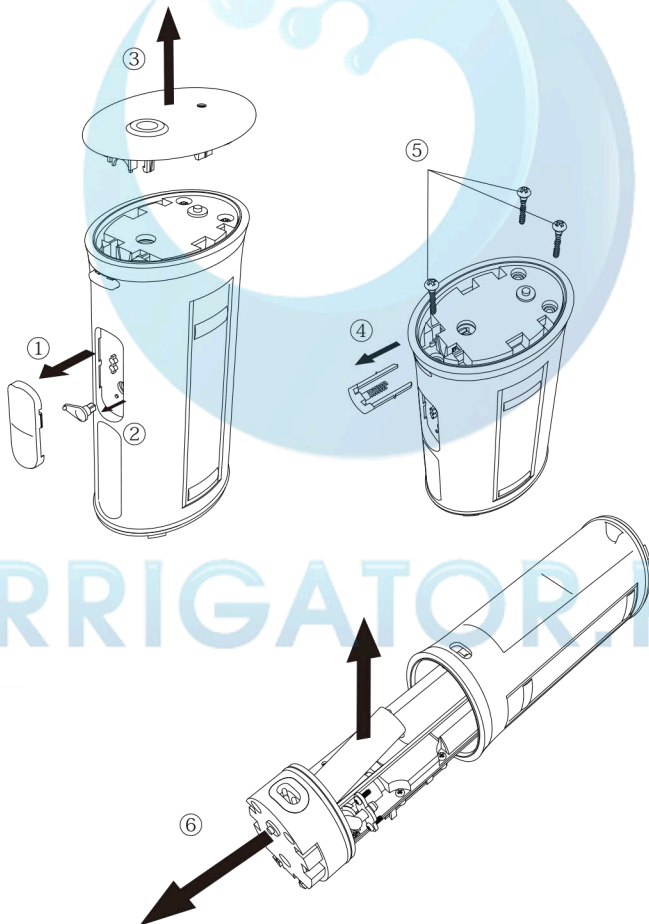

Сервис и гарантия

Гарантийное покрытие:

Любые дефекты материала или производственные дефекты.

Гарантийное время:

1 год с даты покупки

Как получить сервис:

Сохраните чек как доказательство продажи.
Обратитесь к дистрибьютеру за помощью.

Гарантийные ограничения:

Поломка в следствии пренебрежительного обращения.
Ущерб от коммерческого использования.
Модификация продукта не допускается.
Транспортные расходы связанные с ремонтом.
Косвенные или случайные убытки

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Магазин: _____

Дата: _____

ФИО, подпись продавца: _____

Печать:

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Россия, 195220, Санкт-Петербург
проспект Непокоренных дом 17 корпус 4

Телефон: +7(812) 716-46-32

Прием производится только по предварительной записи по телефону

