


# waterpulse

## V660

### Ирригатор для полости рта

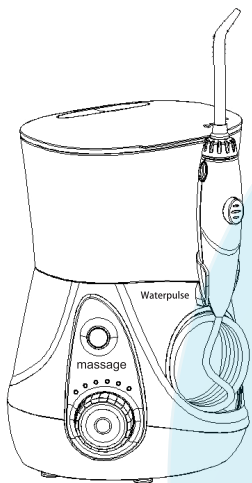

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вы стали обладателем уникального устройства, которое обеспечивает эффективную гигиеническую защиту полости рта. Ирригатор Waterpulse V660 способен развивать высокий уровень давления жидкости, позволяющий проводить глубокое очищение даже самых труднодоступных участков зубного ряда. Использование функции «Массаж» позволяет эффективно поддерживать здоровье десен, активизируя кровоснабжение тканей.

#### Меры предосторожности

Перед использованием ирригатора Waterpulse V660 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Это поможет вам максимально эффективно и комфортно использовать прибор.


1. Не берите штепсельную вилку влажными руками.
2. Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или другими жидкостями.
3. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
4. Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и немедленно выдерните вилку из розетки.
5. Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
6. Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте целостность кабеля питания.
7. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
8. Не направляйте струю воды под язык, в ухо, полость носа или другие уязвимые области. Мощная водная струя, генерируемая прибором, может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек на данных участках.
9. Используйте прибор в соответствии с инструкцией по применению и/или рекомендациями стоматолога.
10. Используйте дополнительные аксессуары и насадки только от ирригатора Waterpulse V660.
11. Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия на корпусе прибора.
12. Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку ирригатора.
13. Храните блок питания прибора вдали от нагретых поверхностей.
14. Не используйте ополаскиватели для полости рта, содержащие в составе йод, масло, отбеливающие агенты.
15. Используйте для ирригации воду или раствор, рекомендованный стоматологом.
16. Не используйте при наличии открытых ран в полости рта или на языке.
17. Если вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и принимаете антибиотики перед проведением стоматологического лечения, перед применением ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
18. Не снимайте пластиковый кончик с прозрачной насадки для очистки пародонтальных карманов. Если он потерялся, замените насадку на новую.
19. Не разрешайте детям играть с прибором.

#### Эксплуатация устройства

1. Вставьте блок питания в исправно работающую розетку.
2. Снимите крышку резервуара и сам резервуар с корпуса прибора. Наполните резервуар водой. Плотно закрепите резервуар на корпусе прибора.
3. Вставьте насадку в центральный разъем, расположенный в верхней части рукоятки. Маркировочное кольцо насадки должно быть на одном уровне с верхней границей рукоятки. Для того, чтобы достать насадку, нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки одновременно с извлечением ее из рукоятки.
4. Включите прибор. Для выбора уровня мощности напора водной струи используйте регулятор регулировки давления, расположенный на корпусе ирригатора.
5. Наклонитесь к раковине, введите насадку ирригатора в полость рта и расположите ее кончик напротив зуба. Во время ирригации продвигайте насадку вдоль линии десны, последовательно очищая каждый зуб.
6. После завершения использования прибора приведите регулятор давления жидкости в минимальный уровень, а затем нажмите кнопку включения-выключения питания.

#### Режим ирригации

Расположите насадку в полости рта таким образом, чтобы поток струи был направлен под углом 45° к поверхности зуба. Чтобы вода не разбрызгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Для лучшего результата вначале очистите боковые зубы (моляры), а затем передние. Продвигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки.

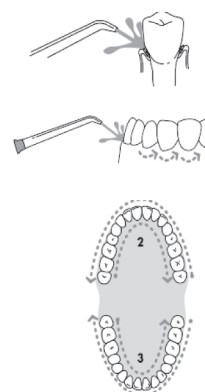

#### Режим массажа

Для активации режима необходимо нажать на кнопку Massage, расположенную над регулятором уровня давления. При проведении массажа рекомендуется использовать стандартную сменную насадку.

#### После завершения ирригации

Выключите ирригатор. Извлеките блок питания из розетки. Ирригатор не предназначен для хранения в нем воды. После использования оставшуюся жидкость необходимо слить.

#### Использование ополаскивателей для полости рта и других растворов

Вы можете использовать для ирригации различные ополаскиватели для полости рта и антисептические растворы. Для подбора раствора проконсультируйтесь у стоматолога.

Внимание: в некоторых антисептических растворах содержится спирт, который при длительном контакте с системой ирригатора может уменьшать его срок службы. После каждого использования специального раствора для ирригатора тщательно промойте систему. Наполните резервуар достаточным количеством воды, направьте насадку по направлению к раковине и включите устройство. Прогоните через систему ирригатора всю воду в резервуаре. При этом вымываются остатки растворов из ирригатора, предохраняя систему от засорения.


#### Очистка и уход

Перед очисткой ирригатора отсоедините блок питания от электрической розетки. При необходимости используйте для очистки мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство. Не погружайте насадки в кипящую воду. Для их очистки используйте спирт. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора. Используйте чистящее средство Revyline, согласно инструкции по его применению.


#### Гарантия

Если поломка ирригатора произошла в течение 7 дней после его покупки, обратитесь в сервисный центр. В случае подтверждения заводского дефекта вы можете вернуть ирригатор или починить/обменять его на новый. Гарантия на прибор 2 года. В течение 2-х лет с момента покупки предоставляется бесплатное сервисное обслуживание ирригатора в сервисном центре. После истечения этого срока, техническое обслуживание осуществляется за счет покупателя. Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как насадки, рукоятка и шланг.


#### Насадки в комплекте

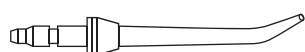

3 стандартных насадки для регулярного использования

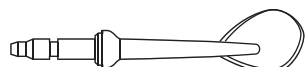

насадка для очистки языка для свежести дыхания

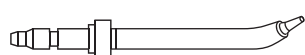

пародонтальная насадка с резиновым наконечником для очистки десневых карманов

#### Руководство по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Устранение
Мотор работает, но вода не подается	Резервуар для воды не плотно примыкает к корпусу прибора	Извлеките резервуар для воды и повторно закрепите его на корпусе прибора
Протечка между рукояткой и насадкой	Насадка не полностью вставлена	Извлеките насадку и повторно вставьте ее в разъем на рукоятке
Мотор не работает	Разъем шнура питания неплотно вставлен в соответствующий разъем, расположенный в нижней части прибора	Повторно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем

#### Распространенные проблемы и их решение

- **Не извлекается насадка.**  
**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку высвобождения насадки, расположенную на рукоятке прибора.
- **Вода не подается или подается под низким давлением.**  
**Решение:** Надавите на резервуар для плотного соединения с корпусом прибора.
- **Сложности выбора уровня напора струи.**  
**Решение:** После включения прибора выберите с помощью регулятора давления необходимый уровень мощности струи, который подбирается индивидуально. Для повышения эффективности ирригации используйте напор воды, не причиняющий вам дискомфорта.
- **Кровоточивость во время ирригации.**  
**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Не волнуйтесь. Прежде всего необходимо уменьшить уровень давления струи. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится.
- **Минимальный напор воды доставляет дискомфорт.**  
**Решение:** Большинству людей подходит средний уровень давления жидкости. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.
- **Как предотвратить разбрызгивание воды?**  
**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

#### Технические характеристики

Наименование прибора: ирригатор Waterpulse  
Модель: V660  
Уровень давления жидкости - 140 - 930 кПа;  
Объем резервуара - 700 мл;  
Режимы работы - 12;  
Режим массажа;  
Частота пульсации - 1 200 в мин;  
Питание - от сети переменного тока;  
Потребляемая мощность - 12 Вт;  
Напряжение: 100-240 В  
Частота: 50-60 Гц  
Входящая мощность: 12 Вт  
Гарантия - 2 года;  
Страна производитель - Китай.  
Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology ( Shanghai ) Co.  
Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China (Shanghai)  
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China (Mainland)

#### Гарантия 2 года.

#### Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

www.irrigator.ru

8(499)343-80-58