



SOOCAS



РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Звуковая электрическая зубная щетка X3 USB версия

ВАЖНО

* Примечание для пользователей

Эффективность чистки этим изделием – в 7 раз выше, чем чистка ручной зубной щеткой. Десны могут слегка зудеть или кровоточить при первом использовании изделия, так как деснам нужно больше времени, чтобы привыкнуть к высокоэффективной чистке. Обычно это длится одну-две недели. Если ощущения не проходят, прекратите использование и обратитесь к стоматологу.

* ВНИМАНИЕ

1. Пользователи, которые проходили ортодонтическое лечение, пломбирование или имплантацию, должны обратиться к стоматологу перед использованием;
2. Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS соответствует электромагнитным нормам. Пользователи кардиостимуляторов или других имплантированных устройств перед использованием должны обратиться к врачу или производителю;
3. Изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей. Если вам больно или возникли неприятные ощущения, прекратите использование и обратитесь к врачу;
4. Заменяйте головку щетки, если она деформирована или если щетина изогнута. Головку щетки нужно менять каждые три месяца. Изношенную головку щетки необходимо менять немедленно. Используйте только головку щетки, рекомендованную SOOCAS;
5. Если ваша зубная паста содержит супероксиды, бикарбонат натрия или бикарбонатные соединения (которые обычно используются в отбеливающих пастах), головку щетки после использования нужно чистить при помощи мыла и воды, чтобы пластик не растрескался;

* ЗАПРЕТ

1. Не погружайте зарядный блок в воду и не используйте его в жидкости;
2. Перед включением в сеть убедитесь в том, что вилка зарядного блока полностью высохла;
3. Изделие оснащено аккумулятором. Не бросайте его в огонь и не используйте при высокой температуре;
4. Не бейте и не роняйте изделие. При повреждении вследствие падения прекратите использование;
5. Не модифицируйте и не разбирайте изделие;
6. Держите изделие подальше от сильных электромагнитных полей, таких как индукционная плита, во время зарядки;


* ВАЖНО

1. Перед использованием убедитесь в том, что изделие не повреждено. Прекратите использование, если оно повреждено или сильно упало;
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия, перед включением его в сеть;
3. Не используйте поврежденный зарядный блок;
4. Не используйте изделие, если ручка или головка щетки повреждены;
5. Не используйте зарядный блок при высоких температурах или под прямыми солнечными лучами;
6. Не используйте щетку во время купания;

* НАПОМИНАНИЕ


1. Не делите одну щетку с другими;
2. Во время зарядки не обматывайте зарядный блок проводом;
3. Не кладите металлические предметы, такие как монеты и ножницы, на зарядный блок;
4. Отключайте блок от питания, если изделие не будет использоваться в течение длительного периода, чтобы предотвратить пожар и прочие риски;

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

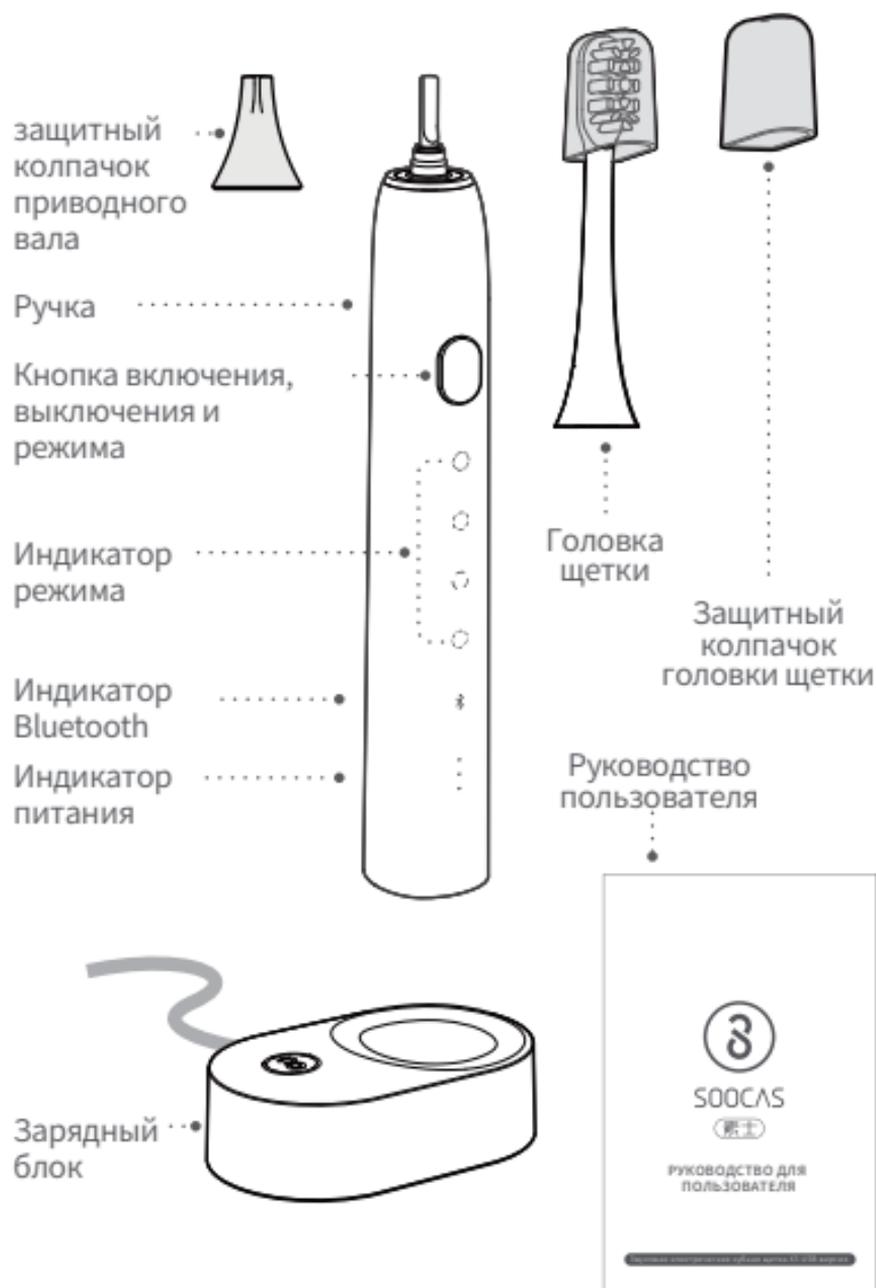

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ШАГ 1:

- Установите головку щетки на ручку и проверьте наличие пространства между двумя частями. (Пространство предотвращает столкновение головки с ручкой при быстрой вибрации и может увеличить мощность двигателя. Поскольку в этом месте может часто скапливаться загрязнение, мы рекомендуем регулярно разбирать и чистить головку щетки.)

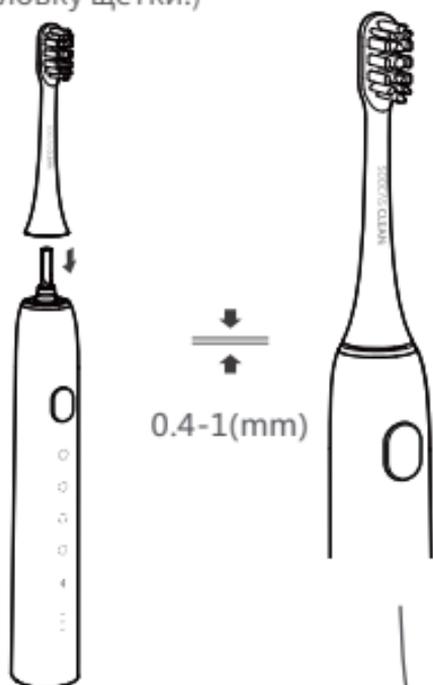



ШАГ 2:

- Намочите головку щетки и нанесите зубную пасту на нее.



ШАГ 3:

- Медленно ведите головкой щетки от зуба к зубу под углом 45 градусов между щетинами и линией десен;
- Можно переключать режим работы, нажимая кнопку включения/выключения;
- Щетка может часто вибрировать во время использования, напоминая, что следует почистить другое место;

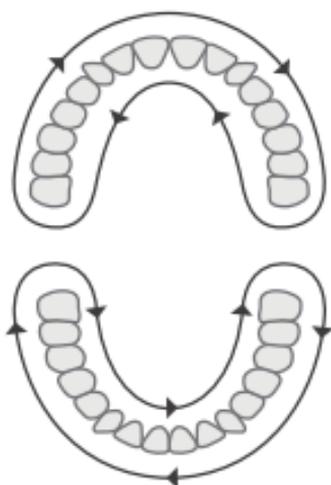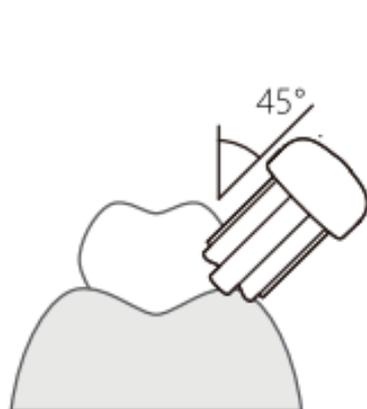

Включение, выключение,
переключение режима

- **Включение:** Нажмите и отпустите кнопку



- **Режим:** Нажмите кнопку при включенной щетке, чтобы изменить режим

- **Выключение:** Когда изделие включено, оно остановится после переключения режима. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы остановить изделие.

- При возникновении сбоя нажмите и удерживайте кнопку в течение 12 секунд, чтобы восстановить настройки по умолчанию.


ЧИСТКА ГОЛОВКИ ЩЕТКИ

- После чистки промойте головку щетки под проточной водой.
- После чистки установите защитный колпачок, чтобы щетка оставалась чистой.

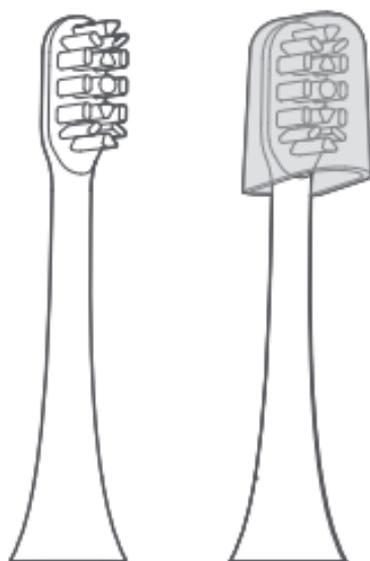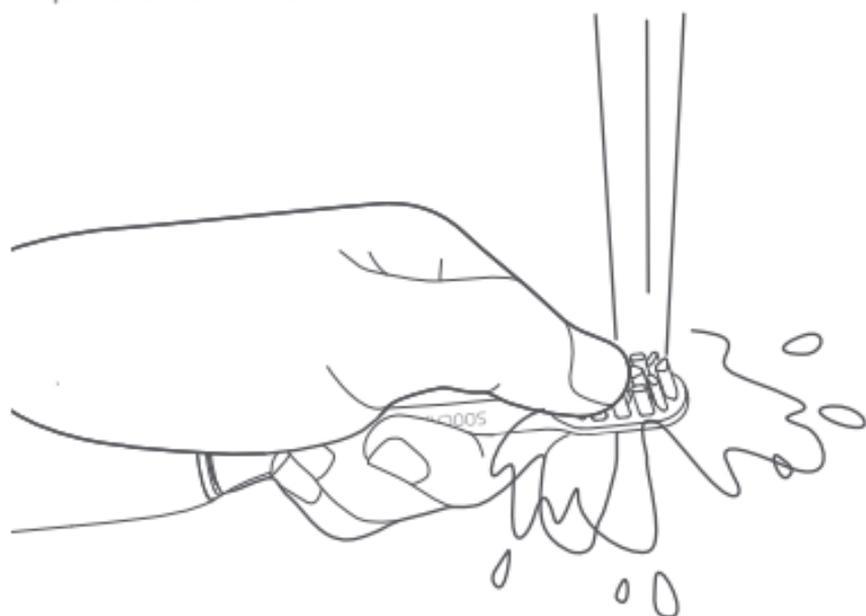

ЗАРЯДКА


- После подключения зарядного блока к сети загорится ЛОГОТИП на блоке;
- Очистите зубную щетку и поставьте ее на блок, как показано на рисунке. ЛОГОТИП загорится ярче;
- Во время зарядки индикатор питания будет мерцать. После завершения зарядки три индикатора будут гореть, а через 2 минуты погаснут;
- Зарядка занимает более 16 часов, если индикатор питания красный.

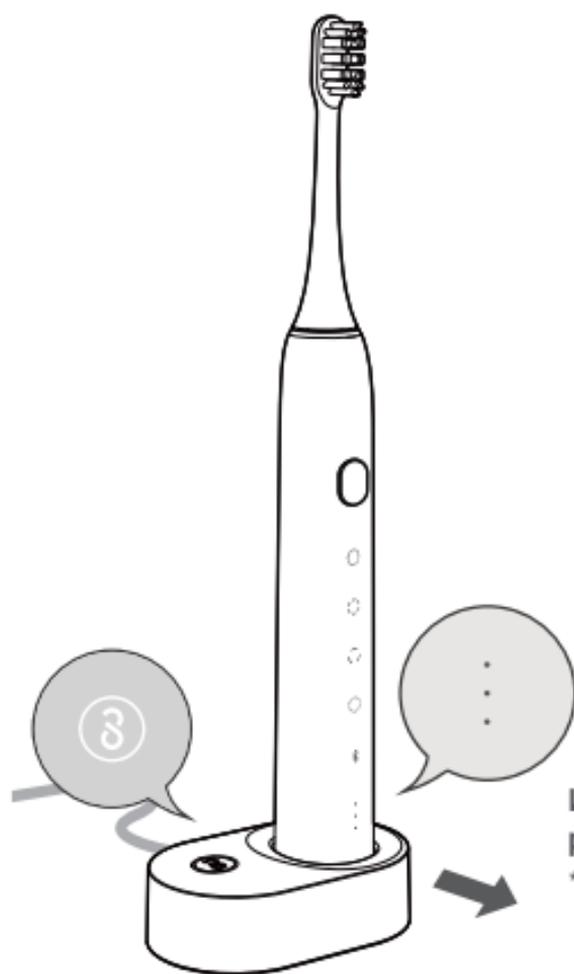

Изображение на рисунке:

*Направление установки зубной щетки

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ЧИСТКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО

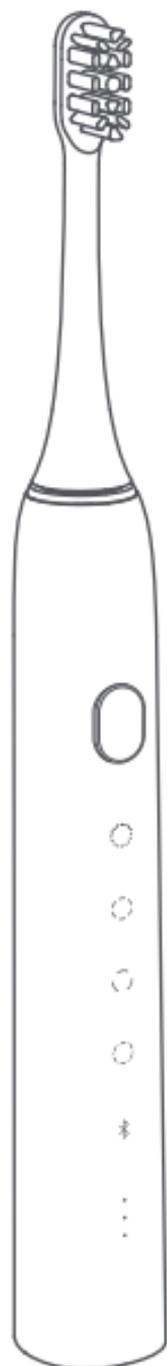

Ежедневная чистка

Головка щетки может вибрировать до 31 000 раз в минуту, создавая эффективный поток жидкости в вашем рту и быстро удаляя зубной налет и пятна. Этот режим разработан для ежедневной чистки.



Чувствительный

Чувствительный режим помогает эффективно чистить зубы и защищать чувствительные десны. Этот режим подходит для тех, чьи десны опухли и болят, или тех, кто перенес операцию по трансплантации или проходит ортодонтическое лечение.



Уход за деснами / первое использование

Этот режим разработан для массажирования чувствительных десен и создания более благоприятных условий чистки. Он разработан для пользователей, у которых есть такие проблемы, как кровотечение десен, язва полости рта, или для тех, кому недавно удалили зубы. Мы рекомендуем использовать этот режим в течение одной недели, если вы используете звуковую зубную щетку SOOCAS впервые, чтобы ваши зубы привыкли к переходу от ручной зубной щетки к этой новой зубной щетке.



Белый/пользовательский

Зубная щетка вибрирует 34 800 раз в минуту, а затем – 37 200 раз. Этот режим разработан для удаления пятен от курения, кофеина и прочих трудноудаляемых пятен. Вы можете воспользоваться функцией настройки в приложении, чтобы настроить собственный режим чистки.

ПРИЛОЖЕНИЕ SOOCAS

Загрузить приложение SOOCAS. Вы можете получать бонусные баллы после чистки зубов, а затем обменивать их на подарки.

Загрузить приложение

Ищите SOOCAS в App Store или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение.




Дом

Потяните вниз, чтобы синхронизировать данные

Сегодняшние бонусные баллы за чистку

Сегодняшний анализ данных чистки

Оставшаяся энергия и время до замены головки щетки

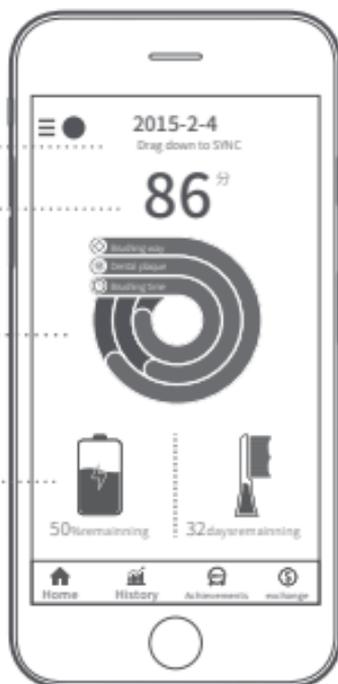

Обмен бонусных баллов на подарки

*Примечание: SOOCAS может интерпретировать вышеуказанное.

SYNCHRONISATION DES DONNÉES

- Загрузите приложение. Зарегистрируйте учетную запись MI и войдите. Нажмите на аватар, чтобы войти в меню устройства.

Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне и найдите SOOCAS.



Шаг 1

Когда индикатор Bluetooth начнет мерцать, нажмите кнопку включения.



Шаг 2



Шаг 3

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИИ

Изделие содержит литиевый аккумулятор, который может загрязнять окружающую среду. Выньте батарею перед утилизацией или отправьте в официальный центр переработки, а батарею отправьте в специальное место сбора. Если вы не можете вынуть батарею, вы можете отправить изделие в центр послепродажного обслуживания. Мы извлечем батарею и утилизируем ее экологически чистым способом.

Технические характеристики

Ручка

Название изделия:
Звуковая электрическая
зубная щетка
Модель: X3 USB
Номинальное
напряжение: 3,7 В
Номинальная
мощность: 2 Вт
Время зарядки:
около 15 часов
Класс защиты от влаги:
IPX7 Страна
производства: Китай
Стандарты: GB-4706.1-2005,
GB -4706.59-2008

Зарядный блок

Способ зарядки:
индуцированный заряд
Тип: герметичный
зарядный блок
Класс защиты от влаги:
IPX7
Потребляемая мощность:
5 V === 0.5 A

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Содержание опасных веществ в изделии

Деталь	Вещество					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Гексавалентный хром (Cr(VI))	Полиброминированный бифенил (PBB)	Многобромистые дифениловые эфиры (PBDE)
Головка	○	○	○	○	○	○
щетки Ручка	○	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○
Зарядный блок	○	○	○	○	○	○
Принадлежности	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с SJ/T11364.
 ○ : Означает, что содержание опасного вещества в этой детали не достигает уровня GB/T26572.
 X : Означает, что содержание опасного вещества в этой детали превышает уровень GB/T26572.

*Головка щетки прошла стандартное тестирование управления санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов



Добро пожаловать на сайт WWW.SOOCAS.COM
Горячая линия: 400 -788 -4008
SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Floor 5,Block 8,Banlihuahui Building, No. 32 Tongsha
Road,Xili Street, Nanshan District, Shenzhen



SOOCAS
OFFICIAL WEBSITE



www.soocas.com

SOOCAS