

# REVYLINE



## RL 075

**SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH**

---


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Перед первым применением электрической щетки RL 075 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.**

Технические характеристики .....	4
Комплектация .....	4
Меры предосторожности .....	5
Предупреждения медицинского характера .....	6
Зарядка аккумулятора .....	6
Насадки в комплекте .....	7
Вкл/выкл прибора .....	7
Выбор режима работы .....	8
Процесс чистки .....	9
Уход за зубной щеткой .....	10
Транспортировка, хранение и утилизация прибора .....	10
Гарантия .....	11

Если у вас остались вопросы,  
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)**

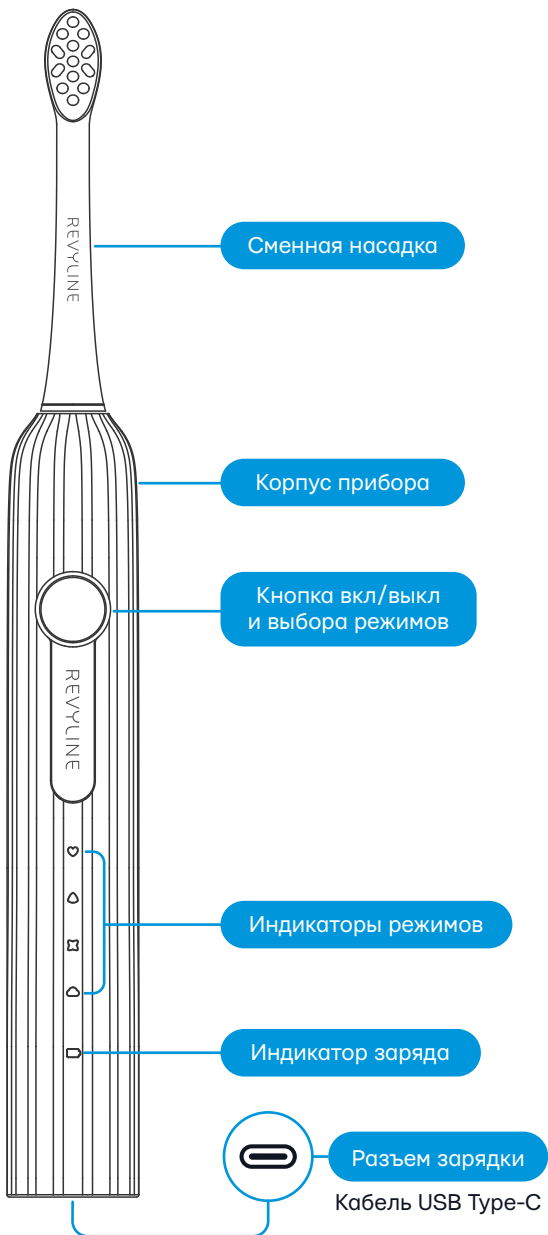

## Электрическая звуковая зубная щетка

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 4 режима работы – Gentle, Gum care, Clean, Polish
- Частота колебаний щетинок – 31 200–37 500 в мин.
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита IPX7
- Питание – литиево-ионный аккумулятор (2000 mAh)
- Потребляемая мощность – 3 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Время полной зарядки – 7 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 180 дней.
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки с защитным колпачком
- 2 сменные насадки в герметичных тубах
- Кабель USB Type-C
- Дорожный футляр на магнитной застежке
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 075 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
- Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
- Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся в основании блока щетки.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



Во время зарядки аккумулятора индикатор заряда медленно мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор горит не мигая.



Если батарея почти разряжена, индикатор заряда быстро мигает, «напоминая» о необходимости подзарядки. Когда батарея полностью разрядится, индикация погаснет.



Щетка работает до 180 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

## НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки RL 075 2 стандартные сменные насадки.




Каждая насадка находится в герметичной трубе.

**Внимание!** Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

## Установка и замена насадки

Снимите защитный колпачок и установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

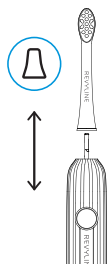

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Включение и выключение щетки осуществляется нажатием кнопки вкл/выкл.



В щетку встроен таймер, благодаря которому автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, позволяя сменить зону чистки.

## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ



Выбор режима чистки осуществляется последовательным нажатием кнопки управления.



Щетка запоминает выбранный режим и включает его при последующем использовании.

**Электрическая зубная щетка RL 075  
позволяет использовать 4 режима работы:**



**GENTLE**

Бережный режим чистки, подходит  
для чувствительных зубов.  
Можно использовать с 8 лет.



**GUM CARE**

Уход за деснами. Эффективная чистка  
зубов и гидромассаж десен.



**CLEAN**

Ежедневная чистка 2 раза в день.




**POLISH**

Полировка эмали. Возвращает зубам  
естественную белизну и придает им блеск.




## ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

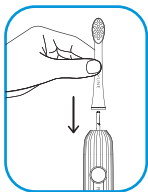


Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.




Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

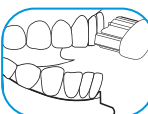

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, по необходимости совершая возвратно-вращательные движения.

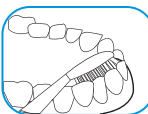

30 сек.

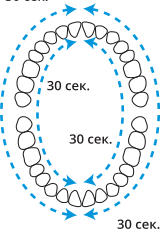

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно.

Поможет в этом 2-минутный таймер, который каждые 30 секунд будет делать короткую паузу, «информируя» таким образом о том, что пора сменить зону чистки. По прошествии двух минут щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

## УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 075.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °С.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом открытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °С до +20 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

REVYLINE

главный секрет вашей улыбки