


ROAMAN


RM-WF8801

Ирригатор
для полости рта

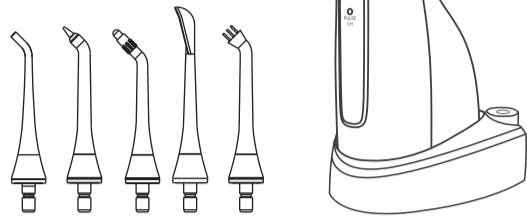

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- A - насадка
- B - кнопка блокировки насадки
- C - кнопка включения/выключения питания
- D - кнопка переключения режимов
- E - LED индикатор режимов
- F - мерная шкала, в мл
- G - резервуар для жидкости
- H - крышка резервуара
- I - индукционная зарядная база

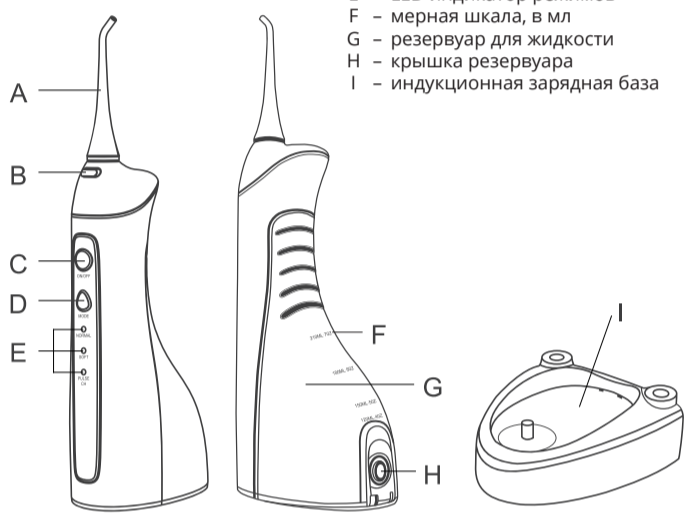

Использование ирригатора существенно повышает уровень гигиенической защиты полости рта, предотвращает возникновение и развитие стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их состояние. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды помогает ирригатору Roaman RM-WF8801 очищать пришеечную область зубов и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки.

Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Roaman RM-WF8801 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
7. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
8. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
9. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
10. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
11. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
12. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
13. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
14. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
15. Если вы принимаете антибиотики непосредственно перед проведением профессиональной гигиены полости рта, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым применением ирригатора или других средств по уходу за полостью рта.
16. Использование ирригатора детьми возможно только под присмотром взрослых.

Зарядка аккумулятора


Для зарядки аккумулятора корпус ирригатора необходимо установить на зарядную базу, подключенную через USB кабель к источнику электроэнергии. Зарядка прибора осуществляется бесконтактным индукционным методом. Мигание светового

индикатора зарядки на корпусе прибора свидетельствует о недостаточном заряде аккумулятора и необходимости его подзарядки. После полной зарядки батареи мигание прекращается, и индикатор начинает непрерывно гореть. Первоначальная зарядка аккумулятора может продолжаться до 24 часов.

Внимание! Перед установкой прибора в зарядную базу необходимо убедиться, что корпус сухой. При необходимости протереть его салфеткой.

Включение прибора

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус так, чтобы входное отверстие было в горизонтальном положении и перпендикулярно направлению струи. Наполните резервуар кипяченой, очищенной водой. Закройте крышку резервуара. Для включения прибора 1 раз нажмите кнопку включения питания ON/OFF. Для выбора необходимого режима работы прибора используйте кнопку MODE. Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

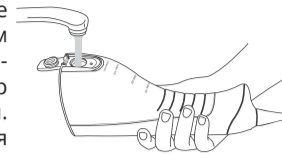

Выбор режима работы

Прибор может работать в трех режимах различного уровня давления жидкости:

NORMAL (Нормальный)
SOFT (Мягкий)
PULSE (Пульсирующий)

Выбор режима осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на ручке устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать режим SOFT.



Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и поверните ее до полной блокировки. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.



Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Во избежание разбрызгивания воды сомкните губы. Вода должна естест-



венным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках. Выполняйте процедуру до тех пор, пока не очистите все зубы с внутренней и наружной стороны.

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости извлеките резервуар из корпуса прибора.

Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

Внимание! В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге, снизить срок его эксплуатации.

Уход и обслуживание

Не погружайте устройство в воду. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. Для облегчения чистки резервуара, его необходимо отсоединить от корпуса. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Гарантия

Гарантия на прибор 2 года. Техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:


На расходные материалы и комплектующие.
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждению; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки указанным в руководстве по эксплуатации.
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц,

явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.
На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации прибора шесть сменных насадок:

- ① Стандартная насадка для регулярной чистки - 2 шт.;
- ② Пародонтологическая насадка с резиновым наконечником для чистки десневых карманов;
- ③ Ортодонтическая насадка для чистки брекетов, мостов и других конструкций;
- ④ Насадка для чистки поверхности языка;
- ⑤ Насадка для ухода за имплантатами.

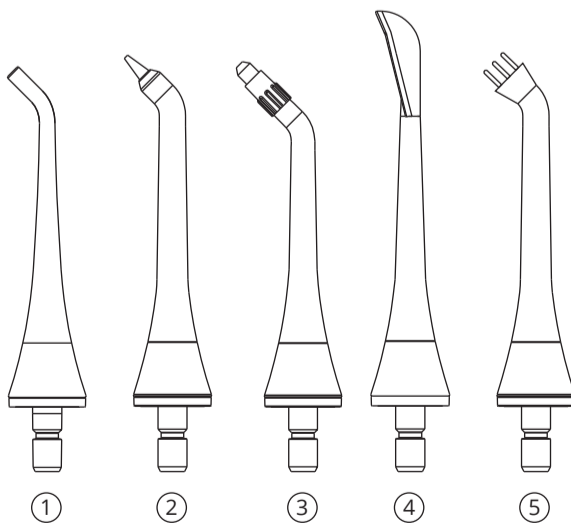

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

www.roaman.ru | Тел.: 8(800)700-53-60

Наименование прибора:

Модель RM-WF8801.
Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.
Питание от литиевого аккумулятора BFN ICR18500, 1 500 мА.
Давление воды: минимальное - около 210 кПа, максимальное - не менее 700 кПа.
Ёмкость резервуара: 220 мл.
Влагозащита корпуса: IPX7.
Уровень шума: ≤ 75 dB.
Вес (без зарядной базы): 440 г.
Размеры ирригатора (без насадки): 196x98x65 мм.
Товар не имеет срока годности.
Средний срок службы: 5 лет.
Хранить при комнатной температуре.
Произведено по заказу ИП Обушенков М.А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.
Сайт: www.roaman.ru. Тел.: 8(800)700-53-60.
Изготовлено: Guangdong Roman Technology Co., Ltd. No. 8, Qifeng Road, Bodi Community, Zhangmutou Town, Dongguan, Guangdong, China (Mainland).

Гарантия 2 года.

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи.....

Место для печати