



SOOCAS

Руководство по эксплуатации

Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1

Спасибо. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед тем, как начать пользоваться этой щеткой

Благодарим Вас за выбор SOOCAS для ухода за полостью рта
Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и разберитесь в правильном использовании звуковой электрической зубной щетки V1, чтобы максимально использовать ее превосходные характеристики и добиться очистки и ухода за зубами.

Пожалуйста, сохраните это руководство и следуйте ниже QR-код, чтобы мы можем предоставить Вам лучший сервис в будущем.



QR-код SOOCAS WeChat

Наименование: Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1
Модель: V1001
Напряжение: 3.7 В Мощность: 2 Вт
Происхождение: Шэньчжэнь, Китай
Критерии реализации: GB4706.1-2005 GB4706.59-2008
Производитель: Sosoon (Шэньчжэнь) техническая компания Лтд
Адрес: 201, корп. А, ул. Цаньхайлань 1, Цаньхай-Шэньчжэнь-Гонконг зона сотрудничества, Шэньчжэнь Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....01
Описание каждого компонента.....02
Быстрый старт.....03
Установка головки щетки.....03
Чистка зубной щетки.....04
Три режима очистки.....05
Правильное использование звуковой электрической зубной щетки V1.....06
Состояние батареек и зарядка.....06
Инструкции по чистке.....07
Время и советы по чистке зубов.....07
О ношении звуковой электрической зубной щетки V1.....08
Защита окружающей среды.....08
Описание опасного вещества.....09
Гарантия.....10
Таблица ошибок производительности продукта.....11

Меры предосторожности

- Чтобы снизить риск неисправности, повреждения электрическим током, травм, пожара и повреждения оборудования и имущества, обязательно соблюдайте следующее:
- Данный продукт имеет встроенные аккумуляторы. Не кладите продукт в огонь, не размещайте продукт в среду с выше 60°C или не допускайте воздействия продукта, так как это может привести к перегреву или взрыву аккумулятора.
 - Не используйте этот продукт при зарядке.
 - Не используйте этот продукт, если крышка порта зарядки не закрыта.
 - Не разбирайте и не ремонтируйте этот продукт самостоятельно.
 - Не размещайте или храните зарядное устройство в местах, откуда устройство может упасть в равнину или воду.
 - Не размещайте этот продукт в пределах досягаемости младенцев и детей.
 - Не используйте этот продукт для других целей, кроме чистки полости рта и здравоохранения.
 - Избегайте падения продукта или его воздействия.
 - Поскольку водонепроницаемые характеристики IPX7 не включают защиту от горячей воды и пара, не используйте этот продукт в ванной или душе.
 - В случае если у вас есть пародонтит, вы проходите стоматологическое лечение, беспокоитесь о дискомфорте во рту или беспокоитесь о дискомфорте во рту, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования данной зубной щетки.
 - Не используйте растворителя для краски, бензол, спирт или другие химические вещества для очистки этого продукта.
 - В начале использования этого продукта может возникнуть небольшое кровотечение, так как десны не приспособлены для этого очень чистого продукта. Кровотечение обычно прекращается в течение 1 - 2 недель. Если кровотечение длится более двух недель, это может указывать на аномалию в деснах. Пожалуйста, прекратите использование этого продукта и обратитесь к стоматологу.
 - Если продукт обнаружен поврежденным, немедленно прекратите его использование.
 - Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальными компонентами, приобретенными у его изготовителя или в сервисном центре.
 - Не разбирайте и не заменяйте аккумулятор внутри устройства самостоятельно. Если вы обнаружите утечку или другие неисправности внутреннего аккумулятора, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания.

01

Описание каждого компонента



02


Быстрый старт

- Смойте голову щетки, выдавливайте умеренное количество зубную пасту на головке щетки, поместите головку щетки на зубы, а затем нажмите кнопку переключения, чтобы загрузить зубную щетку;
- Медленно переключайте головку щетки по всем сторонам зубов и завершите чистку в течение 2 минут;
- Нажмите кнопку переключения еще раз, чтобы выключить электрическую зубную щетку, выньте головку щетки изо рта, и почистите головку щетки и ручку, а затем вытрите ручку мягкой тканью или полотенцем.
- Обратите внимание на состояние индикатора батареек. Если индикатор — красный. Это означает, что зубная щетка должна зарядиться.

Советы: при использовании этого продукта в первые несколько дней во рту может испытывать зуд, потому что десны и язык неприспособлены к нормальному ощущению высокочастотной чистки. Обычно это чувство постепенно исчезнет после нескольких дней использования и адаптации.

Установка головки щетки

При установке головки щетки парадонтит перевернуть вниз щетка совпадает с направлением передней кнопки ручки. Вставьте вал двигателя в отверстие в нижней части головки щетки и протолкните его с небольшим усилием. Когда вы слышите звуковой сигнал, и это означает, что головка щетки собрана на месте с основным корпусом. Зазор между головкой щетки и корпусом должен составлять 0.5-1.0 мм.

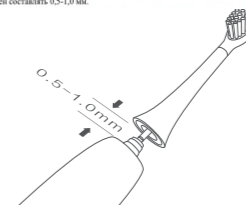

Советы: Для этого продукта, пожалуйста, выберите специальную головку зубной щетки SOOCAS. Если головка зубной щетки используется непрерывно в течение трех месяцев или если потеря щетинок и растрескивание пучка щетинок в головке щетки, пожалуйста, замените новую головку щетки SOOCAS, чтобы не повредить рот и десны.

03

Чистка зубной щетки

- После использования вытрите поверхность тела полотенцем или мягкой тканью.
- После чистки поместите зубную щетку в сухое и проветриваемое место.



04

Три режима очистки

Режим «Чувствительный»

(режим рекомендации новичка)

Если вы впервые используете звуковую электрическую зубную щетку SOOCAS, рекомендуется включить этот режим и непрерывно использовать ее в течение недели, чтобы вы могли плавно перейти от ручной зубной щетки к звуковой электрической зубной щетке. Он обладает эффектом массажа и умеренным эффектом чистки зубов для пользователей, которые чрезвычайно чувствительны к десне. Подходит для пользователей с чувствительными деснами, являющейся в полости рта или тех, кто перенес удаление зуба.

Режим «Стандартный»

Среднеинтенсивная вибрация может эффективно удалить plaque и бактерии в полости рта и быстро удалить зубной налет и другие загрязнения. Подходит для пользователей с эффективной ежедневной потребностью уборки.

Режим «Импульсный»

Переменная вибрация разных частот оказывает непосредственное влияние на пользователей, которые нуждаются в глубокой очистке. Подходит для удаления налета от сигарет, чая, кофе и т.д. на зубах. Эффективно удаляет стойкие пятна на зубах.

Максимальная частота вибрации может достигать 39 000 раз / мин.

05

Правильное использование звуковой электрической зубной щетки V1

Состояние батареи и зарядка

- Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1 имеет встроенный аккумулятор. После полной зарядки время ожидания может составлять до двух месяцев.
- Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1 прошла полную зарядку и разрядку, прежде чем покинуть завод. Однако из-за производственного цикла и естественного разряда время ожидания в первый раз может меняться, но все равно вы можете сразу наслаждаться оптимизированным супер-ослеплением звуковой электрической зубной щетки V1 после получения и распаковки продукта.
- Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1 заряжается с помощью высокоэффективного интерфейса зарядки TYPE-C, который обладает высокой совместимостью и высокой скоростью зарядки. Для его зарядки можно использовать адаптер питания, соответствующий национальным стандартам, но использование адаптера питания низкого качества может привести к непредсказуемым угрозам безопасности.
- Согласно тесту, для полной зарядки требуется около 3 часов. На обратное время зарядки может влиять оставшееся питание и условия зарядки.
- Когда индикатор питания на ручке мигает красным, это указывает на то, что заряд батареек близок к критическому значению малой мощности. Пожалуйста, зарядите звуковую электрическую зубную щетку SOOCAS V1 в это время, чтобы избежать поломки и повреждения встроенного аккумулятора из-за чрезмерной разрядки.
- Когда вы используете звуковую электрическую зубную щетку SOOCAS V1, зеленый индикатор показывает, что аккумулятор полностью заряжен, и вы можете свободно его использовать.
- В лабораторных условиях и аккумулятор полностью заряжен, если вы берем среднее время при трех режимах и используем их два раза в день в течение двух минут, его можно использовать в течение двух месяцев.


06

Инструкции по чистке

- Медленно переключайте зубную щетку под углом 45° между щетинками и деснами.
- Режим чистки зубов можно свободно переключать, нажав кнопку переключения в процессе чистки.
- В процессе чистки зубов возникает кратковременная вибрация зубной щетки, чтобы напомнить вам, что вам нужно изменить положение чистки.
- Пожалуйста, сделайте зубную щетку близко к зубам и держите щетинки не согнутыми.

Время и советы по чистке зубов


Зубная щетка останавливается каждые 30 секунд на 250 микросекунд, чтобы напомнить вам о необходимости регулирования области чистки.

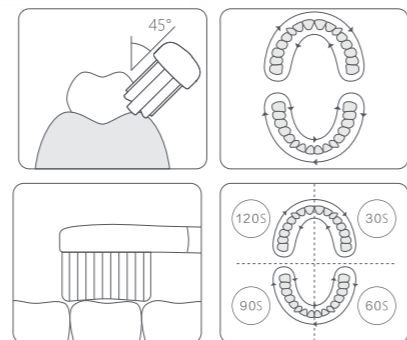

07

О ношении звуковой электрической зубной щетки V1

- Вы можете носить этот продукт, когда вы вылезаете. Поскольку звуковая электрическая зубная щетка V1 использует стандартный интерфейс TYPE-C для зарядки, вам не нужно носить специальное зарядное устройство, но не забывайте использовать зарядный адаптер, который не соответствует стандарту или имеет низкое качество, для зарядки устройств, так как это может привести к сбою внутренней цепи или другим непредсказуемым рискам.
- Во время путешествия, пожалуйста, снимите головку щетки с корпуса, используйте мягкую ткань или полотенце, чтобы высушить влагу на ручке и головке щетки, а затем положите ее в защитную дорожную коробку.

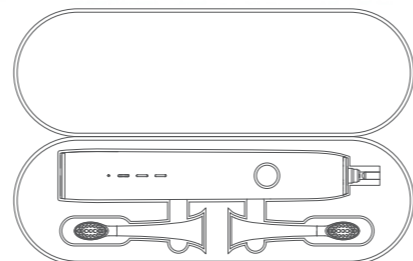

Защита окружающей среды

Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1 имеет встроенный литиевый аккумулятор. Если вы хотите отказаться от него, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы отправить его обратно. Мы разберемся с батареей безвредно для экологии.

08

Описание опасного вещества

Наименование и содержание опасных веществ в продукте.

Названия и детали	Опасное вещество				
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированный дифенил эфир (PBDE)
Щетка голова					
Ручка зубной щетки					
Аккумулятор					
Зарядная база					
Аксессуары					

Эта форма составлена в соответствии с SJ / T11364. O: означает, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах деталей ниже предела, указанного в GB / T 26572. X: означает, что содержание опасных веществ по меньшей мере в одном однородном материале детали превышает предел, указанный в GB / T 26572.

*Щетки прошли стандартное испытание CFDA



09

Гарантия

Послепродажное обслуживание продукта SOOCAS для электрических зубных щеток осуществляется в строгое соответствие с Законом Китайской Народной Республики о защите прав интересов потребителей и Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции. Содержание службы:

Правила гарантии

В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться услугами по возврату, обмену и техническому обслуживанию бесплатно в соответствии с положениями. Обслуживание, обмен и возврат должны быть обработаны по счету.

- Вы можете вернуть товар без какой-либо причины (покупка через канал электронной коммерции) в течение 7 дней после даты подписания и получения, а расходы на доставку несут пользователи.
- Если производитель свой производительности, указанный в «Таблице срока производительности продукта», вы сможете воспользоваться следующей услугой бесплатно после обнаружения и подтверждения.

Тип услуги	Сервисная политика
Возврат	Возврат товара по качеству в течение 7 дней с момента получения
Обмен	Обмен товара на качество в течение 15 дней с момента получения
Ремонт	Ремонт изделия по качеству в течение 1 года с момента получения

Примечание: Внешняя упаковка зубной щетки и головки зубной щетки не может применяться без возврата в течение 7 дней. Другое примечание: из-за необходимости использования упаковочного короба для обеспечения безопасности продукта при транспортировке рекомендуется хранить упаковочные коробки не менее 30 дней с момента подписания и получения.

10

Таблица ошибок производительности продукта

Наименование	Тип сбоя производительности
Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS V1	1. Аварийный выключатель
	2. Неправильная вибрация головки щетки
	3. Ненормальная зарядка
	4. Индикатора не работает

Негативные правила

- Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновение, небрежность, неправильное использование, влечение, несчастный случай, изменение, ненадлежащее использование принадлежностей, не относящихся к продукту, или рефур, изменение этикеток, маркировка против подделки;
- Время использования превысило срок действия трех гарантий;
- Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами;
- Ситуации сбоя производительности не соответствуют «Таблице ошибок производительности продукта»;
- По человеческим причинам продукт и его аксессуары имеют ошибки производительности, указанные в «Таблице ошибок производительности продукта».



QR-код SOOCAS WeChat

Пожалуйста посетите домашнюю страницу технологии SOOCAS WWW.SOOCAS.COM
Национальная горячая линия послепродажного обслуживания: 400-783-4088
Производитель: Sosoon (Шэньчжэнь) техническая компания Лтд
Адрес: к. 201, корп. А, ул. Цаньхайлань 1, Цаньхай-Шэньчжэнь-Гонконг зона сотрудничества, Шэньчжэнь



11